

# アデント 取扱商品一覧

技工用器材 編

中分類名：研磨材

小分類名：ペースト研磨材

メーカー	(株)ジーシー	(株)松風	(株)松風
商品名	ラッピングペースト	ジルグロス	デュラポリッシュ
			
	<p>(人工歯自動削合用ペースト) 咬合器上での義歯の咬合調整に使用。正確に自動削合が行えます。</p> <p>■色調：ブラック(陶歯用)、 グリーン (レジン歯・陶歯仕上げ用)</p> <p>■包装：ブラック50g/グリーン55g</p>	<p>(最終仕上用研磨コンパウンド) セラミックス製補綴装置の最終仕上げに使用するワックス研磨材。特にジルコニアに対して非常にすぐれた研磨力を誇り、ジルコニア補綴装置の対合歯摩耗リスクを防ぎます。</p> <p>■包装：20g、40g</p>	<p>(中仕上げ用研磨コンパウンド) ポイントでは届きにくい裂溝や前歯舌側などに残った比較的大きな傷を簡単に除去できます。メタルや床用レジンの凹凸部の最終仕上げに使用しても短時間で光沢が得られます。</p> <p>■包装：20g</p>
規格			
定価	(ブラック)¥1,600/(グリーン)¥990	(20g)¥10,500/(40g)¥14,000	¥2,000
メーカー	(株)松風	(株)松風	(株)モリタ東京製作所
商品名	デュラポリッシュ ダイヤ	ラッピングペースト	P-ハイブリッド(プラスチック容器入)
			
	<p>(仕上げ用研磨コンパウンド) 砥粒にダイヤモンドだけを使用した高密度ダイヤモンドワックス研磨材です。短時間で簡単にツヤを出すことができ、陶材にもお勧めです。</p> <p>■包装：5g</p>	<p>(咬合調整用研磨材) 義歯咬合面の選択削合終了後の自動削合用です。</p> <p>■種類：粗粒(白)、中粒(茶)、 細粒(白)</p> <p>■包装：各30g</p>	<p>(歯科技工用アブレジブ研削材) ダイヤモンドを多く含み、簡単に光沢を引き出せるので、ハイブリッドセラミックスやポーセレンの研磨、つや出しに抜群の効果を発揮。</p> <p>■包装：30g</p>
規格			
定価	¥4,800	各 ¥1,000	¥15,400

# アデント 取扱商品一覧

技工用器材 編

中分類名：研磨材  
小分類名：ペースト研磨材

メーカー	(株)モリタ東京製作所	クラレノリタケデンタル(株)	(株)ヨシダ
商品名	P-マルチソフト(プラスチック容器入)	パールサーフェス Z	エターナルグローウ
			
	<p>(歯科技工用アブレイブ研削材) 水溶性のため金属・レジンとの境界は黒ずまず、研磨後の洗浄が容易。最も光沢性に富み特にレジンには抜群の仕上げ。</p> <p>■包装：200g</p>	<p>(ジルコニア用研磨材) フルジルコニアクラウンの研磨や、ジルコニアフレームのサポート形状部分の研磨に使用する。ポーセレンなどガラス系材料やハイブリッドセラミックスの研磨にも使用可能。</p> <p>■包装：20g</p>	<p>(補綴物の表面艶出し材) ジルコニア・ハイブリッドレジン・ポーセレンなどの補綴物の表面艶出し材。ダイヤモンド粒子が細かく研磨効率が良いので短時間で様々な補綴物の仕上げに使用できます。</p> <p>■包装：25g</p>
規格			
定価	¥4,900	¥6,500	¥12,000
メーカー	サンデンタル(株)／ハトー	サンデンタル(株)／ハトー	サンデンタル(株)／ハトー
商品名	ハトーポリスター ダイヤモンドペースト	ハトーポリスター エマルジョン	ハトーポリスター ポリッシングクリーム
			
	<p>(コンパウンド・研磨剤) 3μmの天然ダイヤモンド砥粒を配合した、貴金属、非貴金属合金、コバルトクロム合金、チタン、ナノコンポジット、歯科用セラミックの仕上げ研磨用ペースト。フェルトポリッシャーとともに。</p> <p>■包装：4g</p>	<p>(コンパウンド・研磨剤) 貴金属、非貴金属合金、コバルトクロム合金、チタン、コンポジット、歯科用セラミックの最終仕上げ研磨用乳液タイプ。研磨対象物に塗布して綿糸バフで。</p> <p>■包装：50mL / 125mL</p>	<p>(コンパウンド・研磨剤) アクリル樹脂、軟性レジン、コンポジットレジン、貴金属の光沢研磨用クリーム。布バフ、フェルト、マイクロファイバーレーザー製ブラシと併用でご使用下さい。</p> <p>■包装：90g</p>
規格			
定価	¥5,200	(50mL) ¥1,700 / (125mL) ¥2,600	¥2,100

# アデント 取扱商品一覧

## 技工用器材 編

中分類名：研磨材

小分類名：ペースト研磨材

メーカー	サンデンタル(株)／ハトー	サンデンタル(株)	大栄歯科産業(株)
商品名	ハトーポリスター プロ ダイヤモンドペースト	mAx ポリペースト	フレックスシャインプロペースト(HP用)
	 <p>(コンパウンド・研磨剤) 2μmの天然ダイヤモンド砥粒を配合した、ジルコニアの最終光沢研磨用ペーストです。素早くより効果的に研磨できナチュラルな光沢をもたらします。</p> <p>■包装：8g</p>	 <p>(コンパウンド・研磨剤) レジン・ポーセレン・貴金属からニッケルに至るまで全てのツヤ出しに使用できます。水溶性で研磨後は水できれいに洗浄できます。</p> <p>■包装：120g</p>	 <p>(義歯専用仕上げ用研磨剤) ハンドピース研磨時の焼き付きを抑えるため、あえて油分を多めに配合し調整。研磨しづらい軟性樹脂もスムーズで滑沢なツヤに仕上げます。</p> <p>■包装：50g</p>
規格			
定価	¥5,800	¥2,200	¥3,430
メーカー	山八歯材工業(株)	山八歯材工業(株)	山八歯材工業(株)
商品名	ブルーシャイン	タイガーマルチミニ	タイガーマルチ ゴールド
	 <p>(歯科技工用艶だしペースト研磨材) 全部床義歯、歯冠及び部分床義歯のいずれにも使用可能。 一般硬質レジン・メタル・アクリルレジン専用艶だし研磨材です。</p> <p>■包装：50g／300g</p>	 <p>(歯科用研磨器材) 酸化アルミニウム超微細粉末によって切削力(キズ取り)、艶出し力が大幅にアップ。チタン合金、純チタン、コバルト・クロム合金、硬質・軟質メタル、レジンの研磨。</p> <p>■包装：120g</p>	 <p>(技工用固形研磨材、中研磨・艶出し) 貴金属の研磨・艶出しが、効率よく行えます。 金合金、銀合金、金銀パラジウム合金の研磨。</p> <p>■包装：120g</p>
規格			
定価	(50g)¥700／(300g)¥3,800	¥1,300	¥1,500

# アデント 取扱商品一覧

技工用器材 編

中分類名：研磨材

小分類名：ペースト研磨材

<b>メーカー</b> <b>商品名</b>	山八歯材工業(株)／美須化学研究所 レジンポリ ブルー	山八歯材工業(株)／東永 ミリオンポリッシャー	山八歯材工業(株) アルテシャイン
<b>規格</b>	 <p>(艶出し仕上げ用) レジン床の仕上げに使うクリーム状研磨材です。硬質レジン及び、スルフォン床にも効果を発揮。</p> <p>■ 包装：35g</p>	 <p>(艶出し研磨材) レジンからセラモ金属用の艶出し研磨材です。水に溶いてご使用ください。(メタル、レジン用)</p> <p>■ 包装：500g</p>	 <p>(最終艶出し研磨) 2種類の研磨粗さをご用意し、従来よりも幅広い用途に対応可能となりました。ジルコニア・ポーセレン・硬質レジン</p> <p>■ 種類： ファイン(赤)、エクストラファイン(青)</p> <p>■ 包装：各25g</p>
<b>定価</b>	¥850	¥3,500	各 ¥ 5,000
<b>メーカー</b> <b>商品名</b>	山八歯材工業(株) ジルコスター	(株)クエスト アクアブルーペースト	(株)クエスト ラスターペースト
<b>規格</b>	 <p>(歯科用艶出し研磨器材) ダイヤモンド粒子配合で、ジルコニア、ポーセレン、ハイブリッド硬質レジンの艶出しが素早くできます。</p> <p>■ 包装：20g</p>	 <p>(歯科用研磨器材) ポリアミド系床用樹脂のツヤ出しに優れ水溶性でルージュークリーナーや洗剤、超音波洗浄を必要としません。ペーストタイプで焦げ付きが軽減されます。</p> <p>■ 色調：ブルー ■ 包装：220g(ペースト状)</p>	 <p>(光沢・研磨仕上げ材) 水溶性なのでルージュークリーナーや洗剤、超音波洗浄を必要としません。レジンから金属までオールラウンドにご使用できます。</p> <p>■ 色調：ホワイト ■ 包装：300g(ペースト状)</p>
<b>定価</b>	¥9,000	¥3,300	¥3,750

# アデント 取扱商品一覧

技工用器材 編

中分類名：研磨材

小分類名：ペースト研磨材

メーカー	(株)クエスト	(株)モリムラ	(株)日本歯科商社/レンフェルト
商品名	ピュア ダイヤモンドペースト	ニューポリアップ	レンフェルトポリッシュ
	 <p>(歯科用研削材料) ジルコニア、ガラスセラミック、ハイブリッド硬質レジン素早く艶出しできます。</p> <p>■包装: 20g(ペースト状)</p>	 <p>レジン、ポーセレンからニッケル(コバルトクロム)の艶だしが可能。使用後、ルージュークリーナーや洗剤などで洗浄する必要がなくなりました。</p> <p>■包装: 100g/300g</p>	 <p>ダイヤモンド粒子含有の研磨ペーストで、ポーセレン、ジルコニア、プレセラミックス、硬質レジンなどを簡単に素早く、そして美しく研磨します。</p> <p>■種類: オールインワン、ジルコニア プレスセラミックス、ハイブリッド</p> <p>■包装: 単品 各14mL入</p>
規格			
定価	¥12,600		¥ 6,800、¥ 13,000
メーカー	(株)日本歯科商社/レンフェルト	(株)日本歯科商社/レンフェルト	デンケン・ハイデンタル(株)
商品名	オパール L	ブリネルL	ハイピッカー
	 <p>(歯科用研磨器材) レジンの研磨に適しています。ロビンソンブラシやバフホイール等につけて使用します。</p> <p>■包装: 35g</p>	 <p>(歯科用研磨器材) セラミック用 ダイヤモンドペースト</p> <p>■包装: 5mL</p>	 <p>(金属、ポリカーボネート床、ポリアミド床、アクリル床の艶出し材) 微粒アルミナ質の研磨材ですので美しい艶が容易に得られます。</p> <p>■包装: 100g入(ペーストタイプ)</p>
規格			
定価	¥2,500	¥6,000	¥1,400

# アデント 取扱商品一覧

技工用器材 編

中分類名：研磨材

小分類名：ペースト研磨材

メーカー	内外歯材(株)	内外歯材(株)	内外歯材(株)
商品名	ダイヤグレース	レジンクリーム	ウルトラマルチ
			
<p>ポーセレン、セラミック、ハイブリッドレジンの艶出しにお使い下さい。ダイヤモンド粒子入りハードペーストタイプ。</p> <p>■包装:5g入</p>	<p>レジン/メタル移行部を同時研磨。黒ずみ、変色はありません。焼き付けを生じません。水だけで洗い落とせ油膜を残しません。手荒いが簡単です。</p> <p>■包装:220g入</p>	<p>中仕上から仕上研磨まで素早く出来る高性能研磨材です。最高の切れ味と輝きで研磨時間の短縮ができ、研磨対象物を選びません。最高品質の油脂と砥粒を使用しコストパフォーマンスに優れています。</p> <p>■包装:250g</p>	
規格			
定価	¥15,500	¥2,900	¥2,300
メーカー	内外歯材(株)	内外歯材(株)	内外歯材(株)
商品名	ウルトラマルチ ハイブリット	ウルトラマルチ スーパーファイン	ウルトラマルチ プロフェッショナルキット
			
<p>レジンとフィラー両方に対する切削力を高め傷を取りながら面をならします。ハイブリットレジンや、スルホンなどをウルトラマルチスーパーファインと併用すれば研磨が短時間で行えます。ほとんどのレジン系研磨材として。</p> <p>■包装:180g入</p>	<p>ポーセレン、ハイブリッドレジン、メタル、全ての技工物の最終仕上用研磨剤です。この研磨材を使うことによってレジン部と金属部、陶材部とメタル部など数種類の研磨剤を使い分ける手間も省けます。</p> <p>■包装:200g入</p>	<p>ウルトラマルチ ハイブリットとスーパーファインが一つになりました。これひとつですべての補綴物が研磨できます。</p> <p>■包装:スーパーファイン60g ハイブリット50g入</p>	
規格			
定価	¥3,500	¥3,800	¥3,900

# アデント 取扱商品一覧

技工用器材 編

中分類名：研磨材

小分類名：ペースト研磨材

メーカー	(株)マイクロテック	ペントロン ジャパン(株)	ペントロン ジャパン(株)
商品名	エナメライズ ポリッシングペースト	ジルコポル	マルチポル
	 <p>酸化アルミナ研磨ペーストが、研磨された滑らかな面に驚くほどの艶を出します。  <b>■対象:</b>ポーセレン・ハイブリッドレジン・コンポジットレジン・レジン・金属・予防処理後の天然歯  <b>■包装:</b>3gシリンジ/36g チューブ</p>	 <p>(ジルコニア・セラミック用研磨材)            優れた切削効率と美しい研磨結果を求め、ペーストに微細なダイヤモンド粒子を配合。つやの出しにくい小窩・裂溝も、ブラシやバフのみで簡単につや出しが完了。  <b>■包装:</b>30g入</p>	 <p>(多目的研磨材)            メタルからレジンまで幅広い用途に使用できる多目的研磨材です。  <b>■包装:</b>320g</p>
規格			
定価	(3g)¥4,500 / (36g)¥22,000	¥11,000	¥3,150
メーカー	ペントロン ジャパン(株)	ペントロン ジャパン(株)	ペントロン ジャパン(株)
商品名	フェグポルKU-100 NEW	プロトフィックス ポリッシュクリーム	フェグポル TI-99
	 <p>(レジン用研磨材)            中研磨から艶出し研磨までおこなえるアクリルレジン用研磨材。金属面の研磨にも効果があるため、フィニッシングラインの研磨も短時間で美しい光沢が得られます。  <b>■包装:</b>200g</p>	 <p>(レジン用光沢仕上げ研磨材)            短時間でキメの細かい光沢仕上げが可能。クリーム状の水性ペーストの為、研磨後の洗浄も容易。  <b>■包装:</b>100g</p>	 <p>(チタン専用研磨材)            短時間で、美しい光沢仕上げが可能な、チタン専用研磨材です。  <b>■包装:</b>250g</p>
規格			
定価	¥2,520		¥3,100

# アデント 取扱商品一覧

技工用器材 編

中分類名：研磨材

小分類名：ペースト研磨材

メーカー	(株)ビーエスエーサクライ	(株)ビーエスエーサクライ	(株)ヨシオカ
商品名	ジルコン フラッシュ	A-1(ペーストタイプ)	エム・ワイ ブルーペースト
			
	<p>ジルコニア、e-max、ポーセレンはもちろん、ハイブリットレジン、コンポジットレジンを手間、無駄なく手早くピカピカに仕上げることができます。ダイヤモンド粒子配合率はトップクラス。飛び散らないので口腔内でも使用可能。</p> <p>■包装：5g</p>	<p>(万能水性艶出し研磨剤) オールインワンタイプなのでアクリル樹脂・貴金属は勿論、難研磨性補綴物にこそ真価を発揮します。</p> <p>■包装：300g</p>	<p>(金属・スルフォン・レジン・陶材等の一般的な艶出し用ペースト研磨材) 最終研磨に御使用ください。水溶性。研磨後は水できれいになります。</p> <p>■包装：180g</p>
規格			
定価	¥2,800	¥3,200	¥2,600
メーカー	(株)ヨシオカ	(株)アイディエス	(株)茂久田商会／DVA社
商品名	エム・ワイ オーロラペースト	ミラーブリエ	ジルコンブライト(プラスチック容器入)
			
	<p>(メタルボンド、ハイブリッドレジン用) ダイヤモンドの微粉末を添加したペースト状の研磨材です。ハイブリッドレジン・メタルボンド等光にくい素材をスピーディに光らせるよう調整されています。</p> <p>■包装：10g</p>	<p>コバルト・ジルコニアでも短時間で光らせます。ダイヤモンド粒子配合で、特にコバルトクロム合金に対して優れた研磨性を発揮します。</p> <p>■包装：10g／20g</p>	<p>(ダイヤモンド入り研磨材) 飛び散らない特殊成分を配合。ポイントでは届きにくい、溝に残った黒ずみも簡単に研磨できます。</p> <p>■用途：ジルコニア・ポーセレン・コンポジットレジン</p> <p>■包装：40g／20g</p>
規格			
定価	¥4,000	(10g) ¥ 6,250 / (20g) ¥ 9,000	(40g) ¥ 17,000 / (20g) ¥ 13,000



# アデント 取扱商品一覧

技工用器材 編

中分類名：研磨材

小分類名：ペースト研磨材

メーカー	(株)ジーシー	(株)ジーシー	
商品名	グラディア ダイヤポリッシャー	セラシャインポリッシャー	
	 <p>(超硬質レジン用艶出し研磨材) 超硬質レジン「グラディア」のために開発された専用艶出し研磨材。ダイヤモンド砥粒が配合されているため、きわめて効率的な研磨ができます。</p> <p>■包装：8g</p>	 <p>(ダイヤモンドポリッシュペースト) セラシャインと合わせて使用することでセラミックスの研削研磨を効率的に行えます。最終艶出しを容易に行えるため、審美補綴に効果を発揮します。</p> <p>■包装：20g</p>	
規格			
定価	¥4,410	¥7,500	
メーカー			
商品名			
規格			
定価			

# アデント 取扱商品一覧

技工用器材 編

中分類名：研磨材

小分類名：固形研磨材

メーカー	(株)モリタ東京製作所	(株)東京歯材社	(株)東京歯材社
商品名	P-マルチハード(箱入)	ポーセニイ ハイドン	ハイドン N.P.
	 <p>固形のためバフやブラシへの付着が良く、P-マルチソフトよりも研削力が高いので、細かな傷を取ることができます。また、P-マルチソフト同様に金属とレジンの境界は黒ずみません。</p> <p>■包装：500g</p>	 <p>(クラウン・ブリッジの貴金属系補綴物の中研磨・艶出し用) 金属床などの卑金属系補綴物の艶出し用研磨剤としてもご使用頂けます。</p> <p>■包装：120g×2個入</p>	 <p>(金属床などの卑金属系補綴物や硬質レジンの中研磨材) 硬く切削性の優れた焼結アルミナ粉が配合してありますので、硬度の高い金属にも研削効果を発揮します。</p> <p>■包装：120g×2個入</p>
規格			
定価	¥7,900	¥3,800	¥3,800
メーカー	(株)東京歯材社	サンデンタル(株)／ハトー	サンデンタル(株)／ハトー
商品名	ハイドン レジン	ハトーポリスター ポリッシングペースト	ハトーポリスタープロ ポリッシング ペースト ピンク
	 <p>(義歯床などのレジン専用の研磨材) 従来の艶出し材と比較して油脂性を高くし、滑らか形状の微細粒子を主に配合することにより、バフへの付着性が良く、熱によるバフ焼けをおさえ、レジン特有の深みのある光沢が得られます。</p> <p>■包装：120g×2個入</p>	 <p>(コンパウンド・研磨剤) 粘度が高く、飛び散りが少ないので効果的に研磨・ツヤ出しができます。</p> <p>■種類：8種類 ■包装：レギュラー：75g~110g           ラージ：280g~370g</p>	 <p>(アクリル樹脂、軟性レジン、コンポジットレジンの最終光沢研磨用) 既存のコンパウンドと比較しても素早く簡単にハイグロスな光沢が得られます。</p> <p>■包装：150g</p>
規格			
定価	¥3,500	(レギュラー)¥1,100~¥3,500 (ラージ)¥2,200~¥7,000	¥3,900

# アデント 取扱商品一覧

技工用器材 編

中分類名：研磨材  
小分類名：固形研磨材

メーカー	大栄歯科産業(株)	大栄歯科産業(株)	山八歯材工業(株)
商品名	フレックスシャインプロ	マルチブルー	タイガーマルチ
	 <p>レーズ用固形タイプ。油分をコントロールした研磨剤。短時間で滑沢に仕上がります。アクリルレジンから軟質の熱可塑性レジン、PEEK材などに幅広く対応する最終仕上げ用研磨剤。</p> <p>■包装：80g／200g</p>	 <p>(万能艶出し剤) 金属からレジンまで研磨できる万能艶出し研磨材です。軟質レジンの研磨にはフレックスフェザーバフを併用いただくことで驚くほど鏡面に仕上がります。</p> <p>■包装：500g</p>	 <p>(中研磨・艶出し) 酸化アルミニウム超微細粉末によって切削力(キズ取り)、艶出し力が大幅にアップ。油膜の付着が少ない。</p> <p>■サイズ：150×45×40mm ■包装：400g</p>
規格			
定価	(80g)¥2,980／(200g)¥5,950	¥4,900	¥2,300
メーカー	山八歯材工業(株)	山八歯材工業(株)	山八歯材工業(株)
商品名	ネオウィルソルージュ	メタルポリ	レジンポリ
	 <p>仕上げ用研磨材です。</p> <p>■包装：大500g／小35g</p>	 <p>(金属専用) 各種金属酸化物と砥粒を合理的に配合。特殊硬化材にて硬化製作したものの。</p> <p>■包装：90g</p>	 <p>(レジン専用) 各種金属酸化物と砥粒を合理的に配合。特殊硬化材にて硬化製作したものの。</p> <p>■包装：35g</p>
規格			
定価	(大)¥3,230／(小)¥1,370	¥850	¥850

# アデント 取扱商品一覧

技工用器材 編

中分類名：研磨材

小分類名：固形研磨材

メーカー	(株)クエスト	(株)クエスト	(株)日本歯科商社/レンフェルト
商品名	ラスターブルーブロック	ラスターブロック	サファイア
	 <p>油分を含まないのでルージュクリーナーや洗剤、超音波洗浄を必要としません。ツヤ出し素材を選びませんのでレジンから金属までオールラウンドにご使用出来ます。</p> <p>■包装：450g</p>	 <p>金属、硬質レジン、アクリル等の艶出し。油分を含まないのでルージュクリーナーや洗剤、超音波洗浄が不要。艶出し素材を選びませんのでレジンから金属までオールラウンドに使用可能。</p> <p>■包装：160g</p>	 <p>サファイア</p> <p>貴金属、コバルトクローム用ルージュ金属用研磨ペースト。</p> <p>■包装：250g</p>
規格			
定価	¥4,600	¥4,800	¥4,500
メーカー	(株)日本歯科商社/レンフェルト	(株)日本歯科工業社/下村石膏	(株)日本歯科工業社/下村石膏
商品名	ユニバーサルポリッシングペースト	アクティブブライト(レジン用)	アクティブブライト(メタル用)
	 <p>ユニバーサルポリッシングペースト</p> <p>レジン、PMMA用研磨ペースト。</p> <p>■包装：200g X 6</p>	 <p>硬質レジン・床用レジン・スルフォン・貴金属対応の最終艶出し研磨材。軟質タイプのため、パフ・ブラシ等に付着性が良く、また飛散が少ない研磨材。</p> <p>■色調：イエロー ■包装：50g x 2</p>	 <p>金銀パラジウム・銀合金対応の研磨材。光沢度・洗浄性を重視した金属専用の最終艶出し研磨材。</p> <p>■色調：サーモンピンク ■包装：50g x 2</p>
規格			
定価	¥10,000	¥1,650	¥1,700

# アデント 取扱商品一覧

技工用器材 編

中分類名：研磨材

小分類名：固形研磨材

メーカー	(株)日本歯科工業社／下村石膏	デンケン・ハイデンタル(株)	デンケン・ハイデンタル(株)
商品名	ケミブロック	バイオルージュ	スノールージュ
	 <p>アンダーポリッシャーケミブロック 歯科用・固形研磨材(超微細粒子) CHEMI BLOCK NET WT. 40g x 4</p> <p>硬質レジン・床用レジン・スルフォン・貴金属対応の強力軟質固形研磨砂。固成型のため飛散が従来型砂泥より少なく、またレジン表面の焼き付が少ない。 ■色調: グレー ■包装: 40g × 4</p>	 <p>(金属・ポリアミド・レジン等の中仕上げ用) ブラシまたは、バフに付け研磨します。砂研磨後の小キズを素早く滑らかに消します。 ■包装: 800g(固形タイプ)</p>	 <p>(ポリアミド・アクリル・レジン・金属の艶出し) ロビンソンブラシ、またはバフでスピーディーに艶出しができます。 ■包装: 500g(固形タイプ)</p>
規格			
定価	¥2,500	¥3,600	¥3,600
メーカー	デンケン・ハイデンタル(株)	東京歯科産業(株)／ランソン&ランドルフ社	(株)キクタニ
商品名	ホワイトルージュ	タイコー	金ピカ
	 <p>(金属、ポリカーボネート床、ポリアミド床、アクリル床の艶出し材) 青ルージュのように技工機、手指等が青黒く汚れません。 美しい光沢が短時間に得られます。 ■包装: 350g(固形タイプ)</p>	 <p>(メタル粗研磨用コンパウンド) プレシヤスメタルからノンプレシヤスまですべての金属の粗研磨に使用できます。クラウン・ブリッジ・金属床等、あらゆるメタル修復物の研磨に使用できます。 ■包装: 3ポンド(約1.36kg)</p>	 <p>切れと艶を追求した研磨材 金の本来の輝きを引き出す研磨材 ■包装: 250g入</p>
規格			
定価	¥3,600	¥11,000	¥3,200

# アデント 取扱商品一覧

技工用器材 編

中分類名：研磨材

小分類名：固形研磨材

メーカー	DVA社／茂久田	DVA社／茂久田	DVA社／茂久田
商品名	アクリルマーベル 500gキット	アクリルマーベル 200gキット	アクリルマーベル リペアビッツ100P
			
	<p>義歯を多く取り扱う技工所様用。</p> <p>■包装：研磨剤500g×1個 専用綿バフ×1個 綿糸ポイント×2本</p>	<p>技工所は勿論、レーズをお持ちの歯科医院様へ、メンテナンス用として。</p> <p>■包装：研磨剤200g×1個 専用綿バフ×1個 綿糸ポイント×2本</p>	<p>レーズを使用しないチェアサイド補修用として。</p> <p>■包装：研磨剤1.5g×100個 綿糸ポイント×24本</p>
規格			
定価	¥16,800	¥11,800	¥16,800
メーカー	(株)東洋化学研究所	(株)東洋化学研究所	(株)エイカン歯材社
商品名	青ルージュ	赤ルージュ	テルキジン
			
	<p>工業用研磨棒と異なり、研磨成分を多量に配合しているため、光沢がちがいます。青はコバルト、プラチナ、チタンといった硬質合金用に適しています。</p> <p>■包装：25g</p>	<p>工業用研磨棒と異なり、研磨成分を多量に配合しているため、光沢がちがいます。赤は金合金、銀合金など一般合金用に適しています。</p> <p>■包装：25g</p>	<p>つや出し研磨材。</p> <p>■種類：レジン用 メタル用</p>
規格			
定価			各 ¥ 550

# アデント 取扱商品一覧

技工用器材 編

中分類名：研磨材

小分類名：固形研磨材




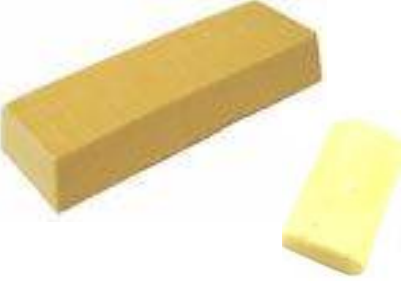


メーカー	内外歯材(株)	内外歯材(株)	吉野石膏販売(株)
商品名	スーパーシャイン	正宗 ミラーポリッシュ メタル	サクラ クイックポリッシャー
			
	固形タイプで超微粒子の砥粒をベースにした金属仕上用研磨材です。金パラジウム合金かCo-Cr, Ni-Cr, Ti Alloy に至るまで、すばらしい光沢が得られます。又、ポーセレン冠等は、メタルと同時にポーセレンの艶出しが出来る為、大変便利。 ■包装：300g入	パラジウム合金・プレシヤスメタル・セミプレシヤスメタル・ノンプレシヤスメタル用の研磨器材。幅広い研磨レンジを持ち、キズ消しから仕上げ研磨までこれひとつで行えます。 ■包装：230g	(艶出し用特殊研磨材) 超高硬度、極微細の砥粒を使用しています。キズを取りながら最終光沢仕上げまで迅速に作業を行なうことができる歯科用金属の最終研磨材。 ■包装：150g
規格			
定価	¥2,500	¥3,400	¥2,000
メーカー	(株)ビーエスエーサクライ	(株)美須化学研究所	(株)美須化学研究所
商品名	ブレイジングクイック	メタルポリ	レジンポリ
			
	(ポリッシングルーージュ) 短時間できれいな艶出しができる自身の1本、特にチタン、コバルト等の難研磨物でお困りの方、是非一度お試しください。 ■包装：300g	(金属の中間仕上げ研磨材) 歯科技工学校でも教材として使用されているロングセラー商品。手のひらに収まるサイズで作業効率高。 ■包装：1本／5本	(レジン床の仕上げ研磨) 歯科技工学校でも教材として使用されているロングセラー商品。手のひらに収まるサイズで作業効率高。 ■包装：1本／5本
規格			
定価	¥2,500	(1本) ¥ 850 / (5本) ¥ 4,250	(1本) ¥ 850 / (5本) ¥ 4,250

# アデント 取扱商品一覧

技工用器材 編

中分類名：研磨材

小分類名：固形研磨材

メーカー	(株)ヨシオカ	(株)ヨシオカ	(株)ヨシオカ
商品名	エム・ワイ ブラウンルージュ	エム・ワイ ホワイトルージュ	エム・ワイ ブルルージュ
	 <p>(樹脂・金属共用中仕上げ用研磨材) 最終研磨の前にお使いになり、研磨面をきれいに仕上げてみてください。</p> <p>■包装：310g／50g</p>	 <p>(金属用最終研磨材) ブルルージュ(共用)より油脂分を少なくし、金属用に調整したルージュ。 金属専用で最終研磨(艶出し)用研磨材。</p> <p>■包装：350g／50g</p>	 <p>(樹脂・金属用最終研磨材) 樹脂・金属共用で最終研磨(艶出し)用研磨材。</p> <p>■包装：330g／50g</p>
規格			
定価	(310g)¥990／(50g)¥550	(350g)¥1,870／(50g)¥1,100	(330g)¥2,750／(50g)¥1,100
メーカー	(株)ヨシオカ	中川セラミックス(株)	中川セラミックス(株)
商品名	エム・ワイ イエロールージュ	ノンクロン	ホワイトラスター アルファ
	 <p>(樹脂用最終研磨材) 弾性レジンなど光沢の出にくい素材用に調整したルージュ。 樹脂専用で最終研磨(艶出し)用研磨材。</p> <p>■包装：340g／50g</p>	 <p>研磨粒子はわずか1<math>\mu</math>で優れた研削効果があり、油成分も非常に少なく、後の洗浄が容易で、すばらしい光沢・艶を得ることができる優れた研磨材です。</p> <p>■包装：280g</p>	 <p>酸化アルミナの微粉8<math>\mu</math>を配合し、特殊加工のより研削力に優れ中研磨から仕上げ研磨まで非常に研削効率のよいルージュです。</p> <p>■包装：400g</p>
規格			
定価	(340g)¥2,640／(50g)¥1,100	オープン価格	オープン価格



# アデント 取扱商品一覧

技工用器材 編

中分類名：研磨材

小分類名：固形研磨材

メーカー	中川セラミックス(株)	中川セラミックス(株)	中川セラミックス(株)
商品名	トリポリ(茶)	青棒(No.1)	クイックライト
			
	(アルミ、樹脂の荒磨き用) 堅いバフで使用下さい。	酸化クロム微粉をステアリン酸や界面活性剤で棒状にしたバフ研磨用研磨材です。	(レジン、金属の中研磨用)
	■包装: 800g	■包装: 500g	■包装: 90g
規格			
定価	オープン価格	オープン価格	¥1,200
メーカー	中川セラミックス(株)	中川セラミックス(株)	中川セラミックス(株)
商品名	アクアライト	ウルトラポリ レジン	ウィールージュ
			
	(中間研磨から仕上げ研磨用研磨材) 金パラ合金、高カラットメタル、銀合金等に使用頂けます。水溶性の為、研磨後の洗浄が容易です。	(レジンの中研磨から仕上げ用) レジン、金パラ合金等の研磨に使用。	(金パラ合金、高カラットメタル、銀合金等の研磨) 切削力重視で研磨工程の時間短縮になります。
	■包装: 140g	■包装: 100g	■包装: 40g
規格			
定価	¥1,300	¥1,200	¥800

# アデント 取扱商品一覧

## 技工用器材 編

中分類名：研磨材

小分類名：パウダー研磨材

メーカー	マケン石鹼(株)／モリタ	山八歯材工業(株)	山八歯材工業(株)
商品名	シリカ	MPパウダー	グレースパウダー
	 <p>歯科用研磨材料 - 歯冠研磨剤 - 歯科用研磨材 シリカ POLISHING POWDER For Dental Use NET 2kg</p> <p>本品は、天然珪砂(研磨成分)と天然粘土(粘性成分)を混合した粉末のレジン床研磨材で、適量の水を加えて泥状にして、レジン床に塗布し、回転ブラシで研磨します。</p> <p>■包装：2kg</p>	 <p>ホコリが出ない。歯頸部に研磨材が残らない。硬質レジン・パラジウム合金の研磨もOK。 専用バフ(MPバフ)との併用によりバリ取り修正後艶出し手前までMPパウダーだけで研磨OK。</p> <p>■包装：1kg／1kg×3</p>	 <p>(金属及びレジンの共用光沢研磨材) ルージュのいらぬ研磨材。手が汚れず人体に影響の無いファインセラミック製品です。水に溶くだけで、全ての補綴物に光沢が得られます。</p> <p>■包装：1.5kg</p>
規格			
定価	¥2,200	¥3,000 / ¥8,500	¥4,500
メーカー	山八歯材工業(株)	(株)クエスト	内外歯材(株)
商品名	クリーミーサンド	ポリッシュパウダー	ニューアクロポリッシャー
	 <p>クリーム状でノリが良く、研磨作業を容易に行えます。 抜群の研磨性と光沢度。 研磨時間を1/2に短縮可能。</p> <p>■包装：6kg(3kg×2袋)</p>	 <p>金属、硬質レジン、アクリル等の艶出し。酸化アルミナの微粒子で、水に溶いてペースト状にし、バフ、ブラシ等を用いて艶出し作業。 油分が無いので焦げ付き等もなく、金属からレジンまで幅広く使用可能。</p> <p>■包装：1kg</p>	 <p>レジン床用の中仕上研磨材。砂状研磨材で、特にレジン床の中仕上用に調合されています。キズ取りが速く、極めて効率的な研磨ができます。同時に金属の研磨も出来ますので、パーシャルデンチャーの研磨に最適</p> <p>■包装：3kg</p>
規格			
定価	¥5,700	¥3,300	¥3,000

# アデント 取扱商品一覧

技工用器材 編

中分類名：研磨材

小分類名：パウダー研磨材

メーカー	(株)ヨシオカ		
商品名	エム・ワイ パウダーダッシュ		
	 <p>(金属・レジン・メタルボンド用) 最終仕上げ(艶出し)研磨材。 粉タイプの研磨材で水に溶かして御使用ください。</p> <p>■包装: 100g / 200g</p>		
規格			
定価	(100g)¥1,320 / (200g)¥2,420		
メーカー			
商品名			
規格			
定価			

# アデント 取扱商品一覧

技工用器材 編

中分類名：研磨材

小分類名：ポリッシングサンド

メーカー	大栄歯科産業	山八歯材工業(株)	山八歯材工業(株)／美須化学研究所
商品名	エンゼルV ポリッシュ	スルフォンサンド	マイクロポリ
	 <p>(火山灰研磨材) レーズによるブラシ研磨時に、樹脂材料を短時間で滑沢な面に仕上げることが出来ます。主成分はシリカ。 ■種類：粗目(粒径250μm) 細目(粒径70μm) 細々(粒径30μm) ■包装：粗目、細目各750g／細々 1.2kg</p>	 <p>(スルフォン、アクリリックレジン床用磨砂) 時間短縮と光沢度をお約束します。従来に比べ、研磨作業を1/2に時間短縮。 ■包装：3kg(1.5kg×2)</p>	 <p>(中仕上げ用研磨砂) レジン樹脂の中仕上げ用研磨砂、研削効率が良いため作業時間の短縮が出来ます。 ■包装：1kgのみ</p>
規格			
定価	(粗目・細目)各¥2,500／(細々)¥3,300	¥4,500	¥1,300
メーカー	(株)クエスト	(株)日本歯科工業社／下村石膏	睦化学工業(株)
商品名	TAKUMI(タクミ)	ケミサンド	エコノサンド
	 <p>(アクリル床義歯、スルフォン床義歯の荒、中研磨) 特殊成分配合により、レーズでの研磨作業時間を大幅に短縮。 ■種類： 荒(荒研磨)／細(中～最終研磨) ■包装：各3kg</p>	 <p>(仕上げ用レジン研磨砂) 強力な研削力を有し、レジン研磨面が驚くほど滑沢に仕上がリ、スルフォン義歯・硬質レジンの研磨に効果を表す科学の砂。 ■包装：2kg</p>	 <p>(超強力レジン床用研磨材) 微潤な粒子で短時間で滑らかな研磨表面を得ることのできる。又、粗粒子の混入による傷の残りがなく、研磨作業時の飛散も低減しています。 ■包装：5kg</p>
規格			
定価	各 ¥ 3,800	¥3,300	¥3,300

# アデント 取扱商品一覧

技工用器材 編

中分類名：研磨材

小分類名：ポリッシングサンド

メーカー	睦化学工業(株)／吉野石膏	吉野石膏販売(株)	吉野石膏販売(株)
商品名	ハイパーサンド	ビックリサンド	サクラ 研磨材
			
	(高性能・強力研磨材) アクリル・スルホン床からプレシャス まで、すみずみの研磨に最適。 厳選した数種類の特種研削原料を合 成し、一段と優れた耐摩耗性・耐衝 撃性を実現。 ■包装：2.5kg	(レーズ用中研磨材) キメが細かく、義歯、補綴物等の中研 磨に適しています。 ■包装：1.5kgラミネート袋 × 10	(レーズ用荒研磨材) 義歯、補綴物等の荒研磨に使用。 ■包装：1kgポリ袋 × 10
規格			
定価	¥3,300	¥15,000	¥10,800
メーカー	デンケン・ハイデンタル(株)	(株)ビーエスエーサクライ	(株)ビーエスエーサクライ
商品名	ナノサンド	ブレイジングサンド	ブレイジングポリッシュ
			
	(ポリアミド・レジン等の砂研磨用) まるで粘度のような砂研磨材。従来、 起きていた砂研磨によるキズをナノ粒 子が最小限に抑えます。また、界面活 性剤を含まないため手荒れも防げま す。 ■包装：5kg	(荒仕上げ用研磨砂) 傷取り効果に大変優れた研磨剤で す。アクリル床はもちろんスルホン 床でも今までのものに比べて格段に スピードアップできます。 ■包装：1kg入	(艶出し用研磨パウダー ) ルージュ不要！レジンも金属もレーズ ブラシでラクラク艶出しできます。水で ペースト状にしてください。レーズブ ラシだけでメタルからレジンまで、きれ いな艶出しができます。 ■包装：1kg入
規格			
定価	¥9,800	¥1,500	¥2,500

# アデント 取扱商品一覧

技工用器材 編

中分類名：研磨材

小分類名：ポリッシングサンド


メーカー	中川セラミックス(株)	(株)サポート	
商品名	A-スナ	クリスタルサンド	
	 <p>(レジンの研磨用) 主に歯科補綴物、レジン研磨研磨に用います。</p> <p>■包装：1kg</p>	 <p>(メタルやセラミックスの最終研磨用) クリスタルサンドを用い 短くなった レーズブラシ等で仕上げると、光沢に 深みが出せます。(セラミックスやCo -Cr、Pd合金や硬質レジンまで研磨 できます)</p> <p>■包装：1kg／2kg</p>	
規格			
定価	オープン価格	(1kg)¥4,200／(2kg)¥7,800	
メーカー	山田歯研産業	山田歯研産業	
商品名	ポリサンド	ポリサンド	
	 <p>極めて純度の高い研磨に有効な成分 を10数種類配合して能率化を図って います。ほとんど白塵も舞うことなく、サ ラッと水洗いできる、粒度均一、無臭の 多角微粉です。</p> <p>■種類：細目(S)／中目(M)／荒目(L) ■包装：2.5kg／9kg</p>	 <p>(メタル専用) 特に金属類に対して極光的な輝きを 生み出す超多角微粉や、水溶性媒体 など10数種の配合は逸品です。</p> <p>■種類：#1・#2 ■包装：2.5kg／9kg</p>	
規格			
定価			

# アデント 取扱商品一覧

## 技工用器材 編

中分類名：研磨材

小分類名：サンドブラスター用砂

メーカー	(株)松風	(株)松風	(株)松風
商品名	ガラスビーズ	ハイアルミナ	カーボランダム
	 <p>(ハイ-ブラスターオーバルジェット用)                      ・軟質合金鑄造体の埋没材・酸化膜除去                      ・鑄造冠、鑄造床の部分研磨                      ・鑄造冠内面の研磨                      ・陶材焼成用埋没材の除去                      ・古い義歯等の付着物の除去</p> <p>■包装：1.5kg×2</p>	 <p>(ハイ-ブラスターオーバルジェット用)                      ・硬質合金鑄造体の埋没材・酸化膜除去                      ・鑄造冠、鑄造床の部分研磨                      ・メタルボンド用鑄造冠の陶材焼成面                      ・メタルボンド用鑄造冠からの陶材の除去</p> <p>■包装：1.5kg×2</p>	 <p>(ハイ-ブラスターⅢ用)                      ・高溶合金鑄造体(バー、クラスプ等)                      ・鑄造床の埋没材と酸化膜の除去</p> <p>※ハイブラスターⅢは販売を終了しています。</p> <p>■包装：1.5kg×2</p>
規格			
定価	¥4,300	¥4,300	¥4,300
メーカー	(株)松風	(株)モリタ／新東工業	(株)モリタ／新東工業
商品名	サンドブラスター用研磨材C#80	ガラスパウダー研磨材	アルミナ研磨材
	 <p>(サンドブラスター用)                      研磨面の仕上がりがなめらかで、ノズルのいたみが少ない研磨材です。</p> <p>■包装：1kg×2</p>	 <p>歯科用軟質合金などの鑄造物からの埋没材、酸化被膜の除去や金属表面処理に適しています。</p> <p>■種類：75 μ                      ■包装：3kg／3kg×6</p>	 <p>歯科用硬質合金などの鑄造物からの埋没材、酸化被膜の除去や金属表面処理に適しています。</p> <p>■種類：50 μ                      ■包装：3kg／3kg×6</p>
規格			
定価	¥3,000	(3kg) ¥4,830／(18kg) ¥22,300	(3kg) ¥5,160／(18kg) ¥23,800

# アデント 取扱商品一覧

## 技工用器材 編

中分類名：研磨材

小分類名：サンドブラスター用砂

メーカー	(株)モリタ/SKメディカル電子	(株)モリタ/SKメディカル電子	山八歯材工業(株)
商品名	ペンシルブラスター用ガラス研磨材	ペンシルブラスター用アルミナ研削材	ガラスビーズ
			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■種類:ガラスビーズ80<math>\mu</math></li> <li>■包装:1.6kg</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■種類:アルミナパウダー50<math>\mu</math></li> <li>■包装:1.6kg</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■種類:#705(149~250<math>\mu</math>) サンドブラスター用</li> <li>#733(44~88<math>\mu</math>) ペンシルブラスター用</li> <li>■包装:各2kg</li> </ul>
規格			
定価	¥3,500	¥4,400	各¥2,400
メーカー	山八歯材工業(株)	(株)クエスト	(株)クエスト
商品名	アルミナス	ガラスビーズ	アルミナ
			
	<p>厳選された酸化アルミで抜群の研削力です。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■種類:44~74<math>\mu</math></li> <li>■包装:2kg</li> </ul>	<p>球体粒子で科学的に安定であるため、加工面が汚染されません。切削能力が均一で「ムラ」が起きません。小バリ等の表面加工に最適です。(粒子75~106<math>\mu</math>)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■色調:ホワイト</li> <li>■包装:3kg、25kg</li> </ul>	<p>研磨力に優れ銅製品、特殊合金等の高い硬さの加工に適しています。(粒子45~75<math>\mu</math>)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■色調:ブラウン</li> <li>■包装:3kg、20kg</li> </ul>
規格			
定価	¥2,400	(3kg) ¥ 3,600 / (25kg) ¥ 29,000	(3kg) ¥ 3,600 / (20kg) ¥ 22,500



# アデント 取扱商品一覧

## 技工用器材 編

中分類名：研磨材

小分類名：サンドブラスター用砂

メーカー 商品名	大栄歯科産業(株) ガラスビーズ	大栄歯科産業(株) アルミナ	デンケン・ハイデンタル(株) リライニングサンド
	 <ul style="list-style-type: none"> <li>・サンド細(循環用) ガラスビーズ、タッパウェア入、サンドE・サイクル</li> <li>・サンド荒(循環用) ガラスビーズ、タッパウェア入、サンドE・サイクル</li> <li>・G-12(循環用) ガラスビーズ、3kg箱入、サンドE・サイクル</li> <li>・G-32(加圧用) ガラスビーズ、4kg箱入、マイクロ・サイクル</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>・メタル用(加圧用) ガラスビーズ、150g×15袋入、マイクロ・サイクル</li> <li>・A-10(循環用) 酸化アルミナ、3kg箱入、サンドE・サイクル</li> <li>・A-22(加圧用) 酸化アルミナ、4kg箱入、マイクロ・サイクル</li> <li>・陶材用(加圧用) 酸化アルミナ、150g×15袋入、マイクロ・サイクル</li> </ul>	 <p>リライニング・プレ・プライマーを使用する際の接着強化用表面処理材。義歯内面用の特殊加工を施したアルミナサンドです。</p> <p>■包装：850g</p>
規格			
定価	¥2,500/¥2,500/¥4,400/¥4,400	¥6,500/¥4,400/¥4,400/¥6,500	¥2,400
メーカー 商品名	デンケン・ハイデンタル(株) ハイアルミナ	デンケン・ハイデンタル(株) アルミナ	レンフェルト社/日本歯科商社 コブラ
	 <p>(メタルボンドの焼付面処理及び金属の表面処理用) 金属フレーム表面のアルミナサンド処理は不可欠なものです。これによって強固な溶着力を促します。</p> <p>■粒径：50μ ■包装：3kg</p>	 <p>(コバルトクロム合金及びニッケルクロム合金の埋没材及び酸化膜除去) シャープな粒子で切削性に優れており硬質合金の埋没材及び酸化膜の除去に適しています。</p> <p>■粒径：250μ ■包装：3kg、25kg</p>	 <p>(酸化アルミナ) 酸化アルミニウムが99.5%以上の焼結アルミナです。酸化シリケートは0.06%以下です。</p> <p>■種類：25μm、50μm、90μm、110μm、125μm、250μm ■包装：各5kg</p>
規格			
定価	¥3,400	(3kg) ¥3,800 / (25kg) ¥24,000	(25μm) ¥15,000 / 他 ¥7,500

# アデント 取扱商品一覧

技工用器材 編

中分類名：研磨材

小分類名：サンドブラスター用砂

メーカー	レンフェルト社／日本歯科商社	睦化学工業(株)	睦化学工業(株)
商品名	ガラスビーズ	ガラスビーズ	アルミナ
			
	(ガラスビーズ) 表面を研磨し滑らかにします。表面をシルキーなマット仕上げしていますので無用な光反射がありません。 ■種類：50 μ m、100 μ m ■包装：各5kg	ペンシルブラスター用。 ■平均粒径：50 μ ■包装：1.5kg × 2	ペンシルブラスター用。 ■平均粒径：50 μ ■包装：各1.5kg × 2
規格			
定価	各 ¥ 6,500	¥2,400	¥3,100
メーカー	ベゴ社	スリーエムヘルスケア(株)	スリーエムヘルスケア(株)
商品名	コロックス	ロカテックサンド	コジェットサンド
			
	(高純度 酸化アルミナ研磨材) 表面処理能力を高めるため、99.6%という高純度のアルミナにより作られたブラスト処理用研磨材。 ■種類：25 μ・50 μ・110 μ・250 μ ■包装：各8kg	(歯科用アブレシブ研磨材) ・サンドソフト 30 μ 3kg X3袋 表面処理用珪含有酸化アルミナ ・サンドプラス 110 μ 3kg X 3袋 表面処理用珪含有酸化アルミナ ・サンドブレ 110 μ 3kg X 3袋 アルミナサンド	(歯科用アブレシブ研磨材) ロカテックのチェアーサイド向けのアルミナ研磨材。接着性レジンセメントとの接着強化に使用します。 ■包装：40g × 3本
規格			
定価	(25 μ) ¥ / (他) ¥	¥78,800 / ¥40,200 / ¥23,000	¥17,500

# アデント 取扱商品一覧

技工用器材 編

中分類名：研磨材

小分類名：サンドブラスター用砂

メーカー	吉野石膏販売(株)	(株)ビーエスエーサクライ	(株)ビーエスエーサクライ
商品名	サンドブラストアルミナ・ガラスビーズ	ガラスビーズ	アルミナ
	 <p>アルミナは各種鑄造金属の埋没材除去・酸化膜除去に使えます。ガラスビーズはクラウンの内面処理や焼付け金属の表面処理に使えます。</p> <p>■種類：アルミナ(60<math>\mu</math>m<math>\pm</math>10%) ガラスビーズ(90<math>\mu</math>m<math>\pm</math>10%) ■包装：各3kgポリ袋</p>	 <p>クラウンの内面研磨、各種金属の表面研磨、レジソ床の石こう除去に適しています。</p> <p>■種類：ファインタイプ 40<math>\mu</math> ノーマルタイプ 50<math>\mu</math> ■包装：各3kg</p>	 <p>純度の高い酸化アルミニウムを採用。酸化チタン等の不純物を含みませんので加工面の汚染がありません。陶材焼付け面の前処理にも最適。</p> <p>■種類：アルミナ50 50<math>\mu</math> ハイアルミナ 150<math>\mu</math> ■包装：各3kg</p>
規格			
定価	各 ¥ 3,900	各 ¥ 2,550	各 ¥ 2,550
メーカー	中川セラミックス(株)	中川セラミックス(株)	
商品名	ガラスビーズ	アルミナ	
	 <p>ニッケルクロム合金系のクラウンの内面仕上げ。貴金属鑄造金属の埋没材や薄い酸化皮膜の除去。</p> <p>■種類：#50(240)、#220、#200 #100、#80、#60 ■包装：各2kg</p>	 <p>メタルボンドクラウン陶材焼成面の金属表面処理。鑄造物に付着した埋没剤や酸化皮膜の除去。</p> <p>■種類：#50(320)、#220、#200 ■包装：各2kg</p>	
規格			
定価	オープン価格	オープン価格	

# アデント 取扱商品一覧

技工用器材 編

中分類名：研磨材

小分類名：ポーセレン用

メーカー	(株)ジーシー	(株)松風	(株)松風
商品名	セラシャインポリッシャー	ジルグロス	デュラポリッシュ ダイヤ
			
	<p>(ダイヤモンドポリッシュペースト) セラシャインと合わせて使用することでセラミックスの研削研磨を効率的に行えます。最終艶出しを容易に行えるため、審美補綴に効果を発揮します。 ■包装：20g</p>	<p>(最終仕上用研磨コンパウンド) セラミックス製補綴装置の最終仕上げに使用するワックス研磨材。特にジルコニアに対して非常にすぐれた研磨力を誇り、ジルコニア補綴装置の対合歯摩耗リスクを防ぎます。 ■包装：20g、40g</p>	<p>(仕上げ用研磨コンパウンド) 砥粒にダイヤモンドだけを使用した高密度ダイヤモンドワックス研磨材です。短時間で簡単にツヤを出すことができ、陶材にもお勧めです。 ■包装：5g</p>
規格			
定価	¥7,500	(20g) ¥ 10,500 / (40g) ¥ 14,000	¥4,800
メーカー	(株)モリタ東京製作所	(株)ヨシダ	サンデンタル(株)
商品名	P-ハイブリッド(プラスチック容器入)	エターナルグロウ	mAx ポリペースト
			
	<p>(歯科技工用アブレイブ研削材) ダイヤモンドを多く含み、簡単に光沢を引き出せるので、ハイブリッドセラミックスやポーセレンの研磨、つや出しに抜群の効果を発揮。 ■包装：30g</p>	<p>(補綴物の表面艶出し材) ジルコニア・ハイブリッドレジン・ポーセレンなどの補綴物の表面艶出し材。ダイヤモンド粒子が細かく研磨効率が良いので短時間で様々な補綴物の仕上げに使用できます。 ■包装：25g</p>	<p>(コンパウンド・研磨剤) レジン・ポーセレン・貴金属からニッケルに至るまで全てのツヤ出しに使用できます。水溶性で研磨後は水できれいに洗浄できます。 ■包装：120g</p>
規格			
定価	¥15,400	¥12,000	¥2,200

# アデント 取扱商品一覧

技工用器材 編

中分類名：研磨材  
小分類名：ポーセレン用

メーカー	(株)モモセ歯科商会／コメット	(株)モリムラ	大栄歯科産業(株)
商品名	ダイヤモンドペースト	ニューポリアップ	マルチブルー 煌(きらめき)
	 <p>陶材とメタルに使用できるユニバーサルダイヤモンドペーストです。</p> <p>■種類：中仕上げ用(9301：赤) 艶出し用(9300：緑)</p> <p>■包装：各5g</p>	 <p>レジン、ポーセレンからニッケル(コバルトクロム)の艶だしが可能。使用後、ルージュクリーナーや洗剤などで洗浄する必要がなくなりました。</p> <p>■包装：100g／300g</p>	 <p>メタルボンドやプレスセラミックなどのポーセレン、ハイブリットレジン、ジルコニア等を短時間で艶出し研磨するダイヤモンド入り研磨材。適度な粘度により、研磨用ホイールやブラシへの付着性が良く、飛散が少ない。</p> <p>■包装：30g</p>
規格			
定価	各 ¥ 10,800		¥9,800
メーカー	(株)日本歯科工業社／下村石膏	(株)日本歯科工業社／下村石膏	山八歯材工業(株)
商品名	スーパースター	スーパースターV	アルテシャイン
	 <p>ポーセレン専用ファイナルポリッシャー。 グレージングに近い光沢を再現。またアロマセラピーのほのかな香りでフレッシュ効果が期待できます。</p> <p>■包装：7g</p>	 <p>ポーセレン専用ファイナルポリッシャー。 チェアサイドポリッシングがスピーディーに。光沢もグレードアップ。</p> <p>■包装：5g</p>	 <p>(最終艶出し研磨) 2種類の研磨粗さをご用意し、従来よりも幅広い用途に対応可能となりました。 ジルコニア・ポーセレン・硬質レジン</p> <p>■種類： ファイン(赤)、エクストラファイン(青)</p> <p>■包装：各25g</p>
規格			
定価	¥4,800	¥5,800	各 ¥ 5,000

# アデント 取扱商品一覧

技工用器材 編

中分類名：研磨材

小分類名：ポーセレン用

メーカー	山八歯材工業(株)	(株)茂久田商会/DVA社	内外歯材(株)
商品名	ジルコスター	ジルコンブライト(プラスチック容器入)	ダイヤモンドグレース
 <p>(歯科用艶出し研磨器材) ダイヤモンド粒子配合で、ジルコニア、ポーセレン、ハイブリッド硬質レジンの艶出しが素早くできます。</p> <p>■包装: 20g</p>	 <p>(ダイヤモンド粒子入研磨材) 飛び散らない特殊成分を配合。ポイントでは届きにくい、溝に残った黒ずみも簡単に研磨できます。</p> <p>■用途: ジルコニア・ポーセレン・コンポジットレジ ■包装: 40g/20g</p>	 <p>ポーセレン、セラミック、ハイブリッドレジンの艶出しにお使い下さい。ダイヤモンド粒子入りハードペーストタイプ。</p> <p>■包装: 5g入</p>	
規格			
定価	¥9,000	(40g) ¥ 17,000 / (20g) ¥ 13,000	¥15,500
メーカー	内外歯材(株)	(株)マイクロテック	(株)ビーエスエーサクライ
商品名	ウルトラマルチ スーパーファイン	エナメライズ ポリッシングペースト	ジルコン フラッシュ
 <p>ポーセレン、ハイブリッドレジ、メタル、全ての技工物の最終仕上用研磨剤です。この研磨材を使うことによってレジ、ン部と金属部、陶材部とメタル部など数種類の研磨剤を使い分ける手間も省けます。</p> <p>■包装: 200g入</p>	 <p>酸化アルミナ研磨ペーストが、研磨された滑らかな面に驚くほどの艶を出します。</p> <p>■対象: ポーセレン・ハイブリッドレジ、ン・コンポジットレジ、ン・レジ、ン・金属・予防処理後の天然歯 ■包装: 3gシリンジ/36g チューブ</p>	 <p>ジルコニア、e-max、ポーセレンはもちろん、ハイブリットレジ、ン、コンポジットレジ、ンを手間、無駄なく手早くピカピカに仕上げることができます。ダイヤモンド粒子配合率はトップクラス。飛び散らないので口腔内でも使用可能。</p> <p>■包装: 5g</p>	
規格			
定価	¥3,800	(3g) ¥ 4,500 / (36g) ¥ 22,000	¥2,800

# アデント 取扱商品一覧

技工用器材 編

中分類名：研磨材

小分類名：ポーセレン用

メーカー	(株)ヨシオカ	(株)ヨシオカ	
商品名	エム・ワイ ブルーペースト	エム・ワイ オーロラペースト	
	 <p>(金属・スルフォン・レジン・陶材等の一般的な艶出し用ペースト研磨材) 最終研磨に御使用ください。 水溶性。研磨後は水できれいになります。 ■包装：180g</p>	 <p>(メタルボンド、ハイブリッドレジン用)ダイヤモンドの微粉末を添加したペースト状の研磨材です。ハイブリッドレジン・メタルボンド等光にくい素材をスピーディに光らせるよう調整されています。 ■包装：10g</p>	
規格			
定価	¥2,600	¥4,000	
メーカー			
商品名			
規格			
定価			